


SORBACT[®] SUPERABSORBENT

Infektionsforebyggende højabsorberende bandage

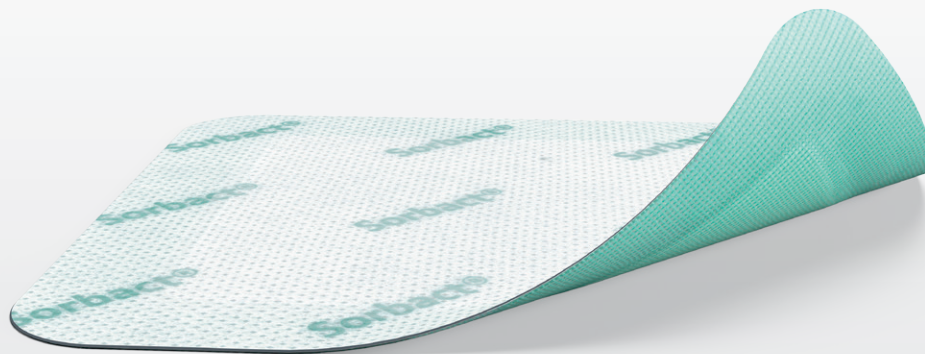

REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING VED KRAFTIGT TIL MEGET KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR


Sorbact[®] Superabsorbent er en steril, bakteriebindende superabsorberende sårbandage. Den består af et grønt sårkontaktlag af acetatvæv kombineret med en superabsorberende kerne og et hvidt vandafvisende underlag. Sorbact[®] Superabsorbent absorberer og tilbageholder eksudat, hvilket reducerer risikoen for maceration og opretholder et fugtigt sårmiljø. Hertil kommer, at Sorbact[®] Superabsorbents høje absorptionskapacitet hjælper med at reducere bandagens skiftetfrekvens.

Produkt	Varenr.	Størrelse	Stk. / æske
Sorbact [®] Superabsorbent	98501	10x10 cm	10
Sorbact [®] Superabsorbent	98502	10x20 cm	10
Sorbact [®] Superabsorbent	98503	20x20 cm	10
Sorbact [®] Superabsorbent	98504	20x30 cm	10




TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact[®] Superabsorbent er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er kraftigt til meget kraftigt væskende, såsom venøse og arterielle sår, postoperative sår, traumesår, tryksår og diabetiske sår.

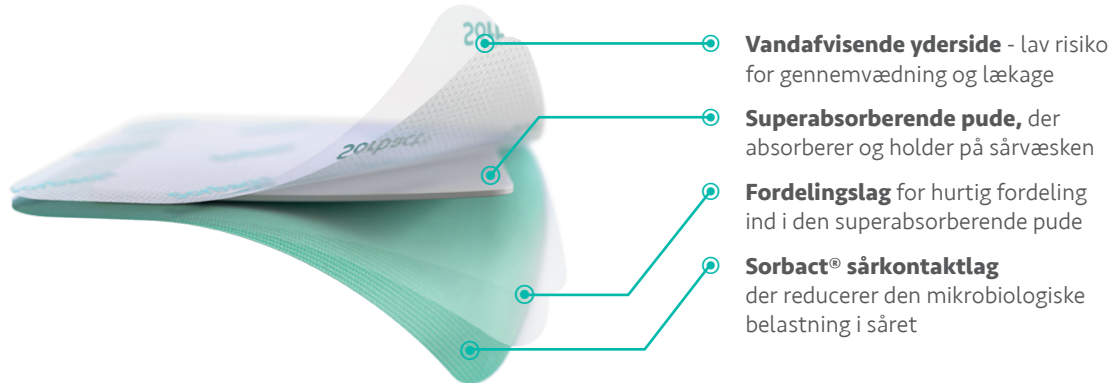

BRUGSANVISNING

1. Behandl såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandage størrelse til såret.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Sørg for at den grønne side af bandagen er i direkte kontakt med såret.
5. Fiksér med hudvenlig tape eller anden passende bandagefiksering.
6. Bandagens skiftetofrekvens afhænger af sårets eksudatniveau og generelle tilstand. Bandagen bør skiftes mindst to gange om ugen.

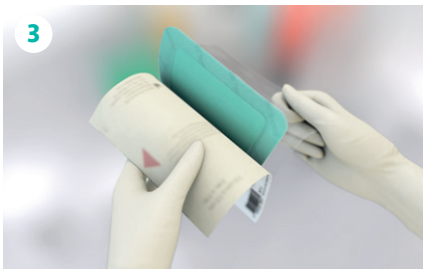

SORBACT[®] – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact[®] bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.